

CODAN Contrelle®



Activgard





CODAN Contrelle®



Contrelle® Activgard est une nouvelle approche de l'incontinence urinaire d'effort chez la femme.

La cause principale de ce type d'incontinence est la faiblesse du plancher pelvien, souvent consécutive aux grossesses, ou aux changements lors de la ménopause. Quand le plancher pelvien se relâche, la vessie descend légèrement et l'angle du col vésical se modifie.

Le sphincter vésical n'est, alors, plus sous contrôle volontaire, lors d'un effort brusque.

La forme de Contrelle® Activgard est telle que sa mise en place dans le vagin soulève légèrement la vessie, modifie l'angle du col vésical, et réduit ou supprime les pertes d'urine pendant l'effort. Détail important, la patiente peut uriner normalement, sans nécessité de retirer Activgard.

Une forme et une action originale


Contrelle® Activgard fonctionne sur un mode actif. Le matériau est une mousse synthétique moulée et douce. Replié en double épaisseur pour son insertion, ce dispositif souple et flexible se déplie pour se positionner correctement dans le vagin.

Le résultat est un soutien léger qui soulève la vessie tout en suivant parfaitement les mouvements du corps.

Les surfaces externes de l'Activgard sont conçues pour s'appuyer parfaitement contre le col vésical et le rectum; il est donc très important de le placer correctement dans le vagin comme indiqué sur le schéma.

Facile à utiliser

Contrelle® Activgard est aussi facile à utiliser qu'un tampon périodique. Il ne se sent ni ne se voit. Après avoir été imprégné d'eau avant son introduction, l'Activgard n'absorbe plus l'humidité naturelle de la muqueuse vaginale. Contrelle® Activgard: un concept simple qui traite le problème plutôt que les symptômes.

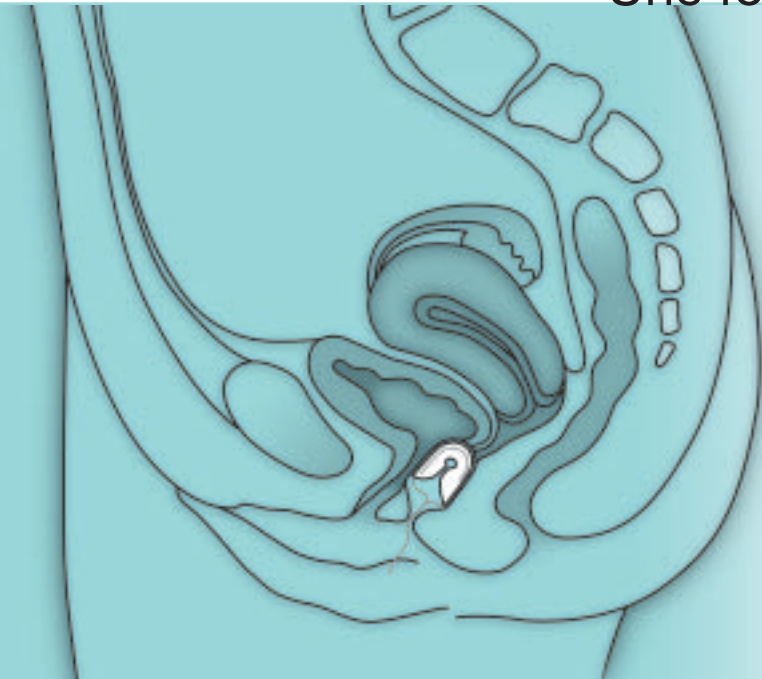

Contrelle® Activgard aide le plancher pelvien à soutenir la vessie et corrige l'angle du col vésical. Les femmes retrouvent ainsi le contrôle volontaire de leur vessie.



Elasticité naturelle pour un soutien léger

Beaucoup d'avantages

Contrelle® Activgard est un dispositif simple et efficace pour l'incontinence d'effort chez la femme.

Retrouver une vie normale

En redonnant à la femme le contrôle de sa vessie, Contrelle® Activgard lui permet de retrouver une vie normale. Plus besoin de vivre dans la crainte d'une perte d'urine involontaire, ou le désagrément des protections absorbantes et le souci des odeurs. Elle peut, à nouveau, vivre la vie qu'elle menait avant d'être incontinente.

Invisible et discret

Contrelle® Activgard, placé dans le vagin, est aussi invisible et discret qu'un tampon périodique. Il peut être laissé en place jusqu'à 16 heures consécutives. Contrelle® Activgard est un dispositif à usage unique, non réutilisable, qui doit être éliminé après son utilisation.

Que faire pour les toilettes?

Il n'est pas nécessaire de retirer l'Activgard lorsque vous allez aux toilettes; Contrelle® Activgard soutient le col vésical sans comprimer l'urètre ni gêner le fonctionnement du sphincter vésical, ce qui permet le retour du contrôle volontaire.

Maximum 16 heures par jour

Contrelle® Activgard peut être laissé en place 16 heures au maximum.

Il doit être retiré avant tout rapport sexuel. Son utilisation durant la grossesse est soumise à l'avis médical. Pendant les règles, l'Activgard sera utilisé seulement avec des protections périodiques externes et sera changé toutes les 4 à 6 heures. Il ne sera jamais utilisé avec des tampons périodiques internes.



Contrelle® Activgard
sur l'applicateur

Contrelle® Activgard

Trois tailles

Contrelle® Activgard est disponible en trois tailles. Les utilisatrices devront faire des essais pour déterminer celle qui leur convient le mieux. Quelques femmes ressentiront, au début, une certaine gêne durant la phase d'adaptation au dispositif.

Education périnéale

Contrelle® Activgard ne remplace pas la rééducation périnéale des muscles pelviens. Il renforcera, au contraire cette rééducation et sera d'une grande aide dans les cas où celle-ci ne donnerait pas de résultats satisfaisants.

Choc toxique

Un choc toxique staphylococcique peut survenir exceptionnellement. Quelques cas ont été décrits, dont la moitié chez des femmes également utilisatrices de tampons périodiques. La plupart d'entre elles étaient des jeunes femmes consommatrices de tampons super-absorbants. L'Activgard est lui, totalement non absorbant s'il est utilisé correctement c'est à dire s'il a été complètement imbibé d'eau avant sa mise en place.

Pas d'incidence sur le PH et la flore microbienne

Les études menées au Danemark ont démontré l'absence de modification du PH et de changement de flore microbienne. Il n'a été observé aucune augmentation du risque d'infection vaginale ou urinaire, ni d'irritation de la muqueuse. L'introduction de l'Activgard est facilité par l'emploi de crème vaginale. Chez les personnes âgées, l'Activgard peut même améliorer l'action d'un traitement hormonal local.



L'Activgard doit être imbibé d'eau avant son insertion

Mode d'emploi

Contrelle® Activgard est aussi simple à utiliser qu'un tampon périodique

- L'Activgard doit être totalement imbibé d'eau du robinet. Le presser pour éliminer le surplus.
- Il est ensuite tendu sur l'applicateur; commencer par mettre le cordon au milieu de l'extrémité plate de l'applicateur. Installer ensuite l'Activgard sur l'extrémité arrondie de l'applicateur.
- L'ensemble applicateur et Activgard est alors introduit dans le vagin jusqu'au cannelures
- Dégager délicatement le cordon de l'applicateur et retirer ce dernier. L'applicateur est nettoyé à l'eau et au savon et conservé pour la prochaine utilisation.

Pour retirer l'Activgard, il suffit de tirer doucement sur le cordon.

CODAN

Activgard est bien documenté

En 1994, 2 études cliniques ont été menées sur Contrelle® Activgard:

- l'une sur 26 patientes incontinentes à l'effort, à l'Hôpital Glostrup au Danemark
- l'autre sur 129 patientes incontinentes à l'effort, dans dix hôpitaux Suédois.

Les études incluaient à la fois des paramètres objectifs et subjectifs. Les tests objectifs consistaient en pesée des protections absorbantes sur 24H, afin d'évaluer les volumes de pertes d'urine. Au Danemark, avant de tester Contrelle® Activgard, différents examens ont été effectués tels que l'étude de la flore vaginale, la mesure du pH, l'évaluation du volume urinaire résiduel, l'uroculture, le profil urétral et la grille mictionnelle. Un questionnaire a permis d'évaluer les paramètres subjectifs.

Amélioration dans 80% des cas

Dans l'étude Danoise, 21 sur 22 patientes ont été satisfaites ou très satisfaites des résultats de Contrelle® Activgard; dans l'étude Suédoise, la proportion est de 66 patientes sur 90.

87% des femmes Danoises ont déclaré qu'Activgard avait réduit la fréquence des fuites, et 72% ont indiqué, qu'en cas de fuite, celle-ci était de volume moins important.

Les résultats correspondants en Suède sont de 77% pour la fréquence et 74% pour la réduction du volume des fuites.

35% de réussite complète

En Suède, l'évaluation objective prouvait le retour à une continence complète dans 35% des cas, et une nette amélioration dans 77% des cas.

Les mêmes études, au Danemark, concluaient à 36% de continence complète et à 64% de nette amélioration.

Pas ou peu d'effets secondaires

Les évaluations ont mis en évidence l'absence de modification du pH et de la flore bactérienne.

Elles ont également conclu à l'absence de risque d'infection vaginale ou urinaire, et d'irritation des muqueuses.

Quelques patientes ont éprouvé une légère sensation d'inconfort, surtout en phase initiale. Néanmoins, la majorité de ces femmes ont, ensuite, déclaré vouloir continuer l'utilisation de Contrelle® Activgard.



Contrelle® Activgard

Taille 1

REF 76.1001

Boîte de 30

Taille 2

REF 76.1002

Boîte de 30

Taille 3

REF 76.1003

Boîte de 30

Chaque boîte contient un applicateur.



CODAN dans le monde entier



Le Groupe CODAN emploie plus de 1500 personnes dans le monde entier. CODAN a une renommée internationale comme constructeur et fournisseur de matériel de perfusion/transfusion à usage unique. CODAN, c'est le synonyme de fiabilité, de qualité et de précision, le tout assuré par le savoir-faire et l'expérience de plus de 40 années de recherche et de développement.

La large gamme des produits CODAN résulte d'un développement orienté à cent pour cent vers les besoins du marché, basé sur l'évaluation rapide des nouvelles exigences cliniques, grâce à l'échange permanent des connaissances et de l'expérience entre les utilisateurs et CODAN.

Nos propres usines de production et nos entreprises de vente dans dix pays sont les garants d'une production efficace, d'un dense réseau de distribution ainsi que de prestations de service de première qualité pour nos clients.

Le Groupe CODAN

CODAN Medizinische Geräte GmbH & Co KG · BRD
CODAN Vertrieb GmbH & Co KG · BRD
CODAN 11 SA · Portugal
CODAN US Corporation · California · USA
CODAN NORGE A/S · Norge
CODAN TRIPLUS AB · Sverige
CODAN Limited · Great Britain
CODAN FRANCE Sarl · France
CODAN Medical AG · Schweiz
ARGUS Medical AG · Schweiz
CODAN BV · Nederland
P.E.C. Medical srl · Italia
CODAN Steritex ApS · Danmark
CODAN Medical ApS · Danmark
CODAN DEHA ApS · Danmark

La gamme de produits CODAN

- Appareils de perfusion
- Appareils de transfusion
- Accessoires de perfusion
- Seringues à usage unique
- Sets de transfert et prélèvement
- Cathéters intraveineux
- Filtres à perfusion
- Gamme de protection Chemoprotect®
- Cyto Systems
- Sets de nutrition entérale
- Sets urologiques
- Sets spécifiques
- Pompes ARGUS green stream®
- Contrelle® Activgard

Notre entreprise satisfait aux réglementations prévues par la directive européenne 93/42/CEE et entretient un Système Qualité conforme à la norme EN ISO 13485.

CE 0123 (TÜV Product Service) pour
CODAN Medizinische Geräte GmbH & Co KG · D-23738 Lensahn

CE 0088 (Lloyd's Register Quality Assurance) pour
CODAN Steritex ApS · DK-3060 Espergærde

CE 0543 (Danish Medical Devices Certification) pour
CODAN Medical ApS · DK-4970 Rødby



CODAN

CODAN Medizinische Geräte GmbH & Co KG
Grüne Straße 11 · D-23738 Lensahn
Tel. +49 (0) 43 63 – 51 11 · Fax +49 (0) 43 63 – 51 12 14
www.codan.de

La bonne connexion